


Длинные имплантаты

длина имплантатов
увеличена до 25 мм





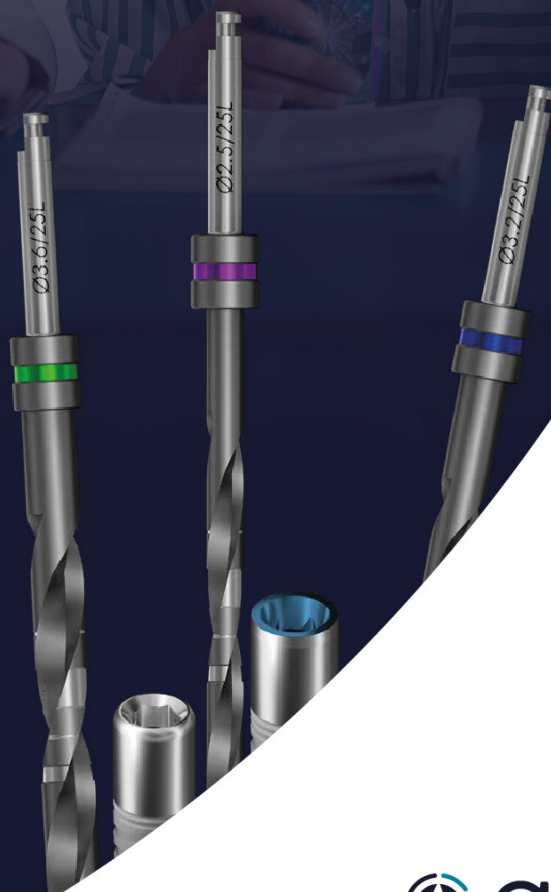


Компания Adin Dental Implant Systems Ltd. представляет широкий ассортимент имплантатов длиной до 25 мм в линейке Touareg– OS и Touareg CloseFit WP.

Длинные имплантаты могут эффективно использоваться в тех случаях, когда требуется большой контакт имплантата с костной тканью, а также при необходимости бикортикальной фиксации, чтобы компенсировать недостаточный объем костной ткани и сохранить при этом высокую первичную стабильность если обычной длины имплантата не достаточно.

Длинные имплантаты Adin обладают рядом преимуществ, которые повышают эффективность их использования, среди этих преимуществ гладкая шейка для лучшего прилегания к десне и узкая вершина для фиксации в малом объеме костной ткани и ограниченном пространстве.

Длинные имплантаты Adin, как и классические дентальные имплантаты, имеют уникальную и эффективную для остеоинтеграции поверхность Osseofix. Дополнительный набор сверл для длинных имплантатов, поддерживающий использование платформы Touareg – OS и Touareg CloseFit WP и измеритель глубины, разработаны для обеспечения максимальной простоты и безопасности применения имплантатов.

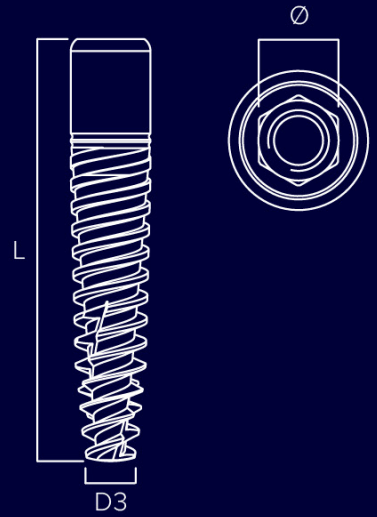

CloseFit WP
Ø= 4.30 мм

Touareg OS
Ø= 4.2 мм


Гладкая шейка
имплантата

Цилиндрическая вертикальная
шейка Ø= 5 мм

Внутренний
шестигранник

Платформа CloseFit WP

Узкая верхушка имплантата

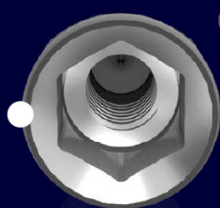

Touareg– OS

Рекомендованный момент силы для установки имплантатов не более 50 Нсм.





	Ø мм	L мм	D3 мм	Номер по каталогу
	4.25	20.00	2.50	ISF2042
		22.50	2.50	ISF2242
		25.00	2.50	ISF2542

CloseFit WP


Рекомендованный момент силы для установки имплантатов не более 50 Нсм.

	Ø мм	L мм	D3 мм	Номер по каталогу
	4.30	20.00	2.50	ISPX2043
		22.50	2.50	ISPX2243
		25.00	2.50	ISPX2543

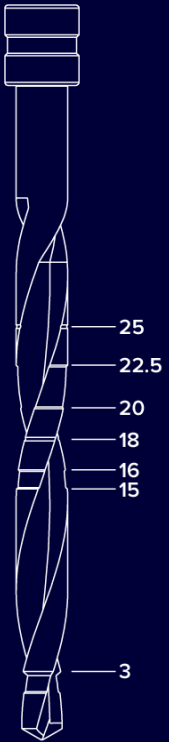Удлиненные сверла

L			Описание	Номер по каталогу
<p>Удлиненные сверла</p>  <p>16-25mmL</p>	1.8/2.5 мм		Удлиненное пилотное сверло	DL2525
	2.5/3.2 мм		Удлиненное двухшаговое сверло	DL2532
	3.2/3.6 мм		Удлиненное двухшаговое сверло	DL2536


Дополнительные инструменты

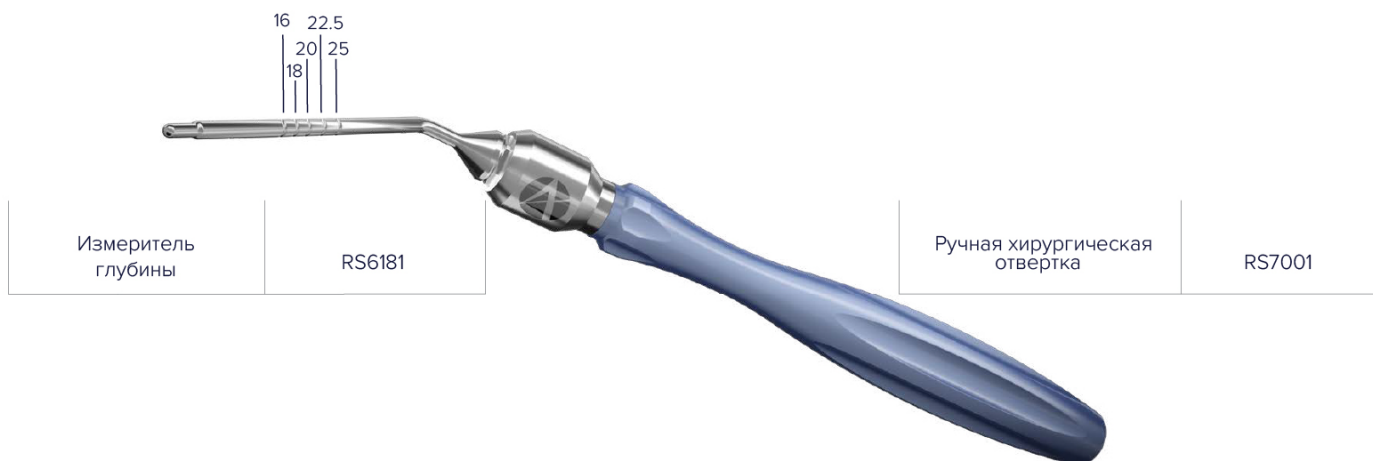


Протокол сверления

Рекомендуемая скорость сверления не более 1200 об/мин.

Тouareg– OS

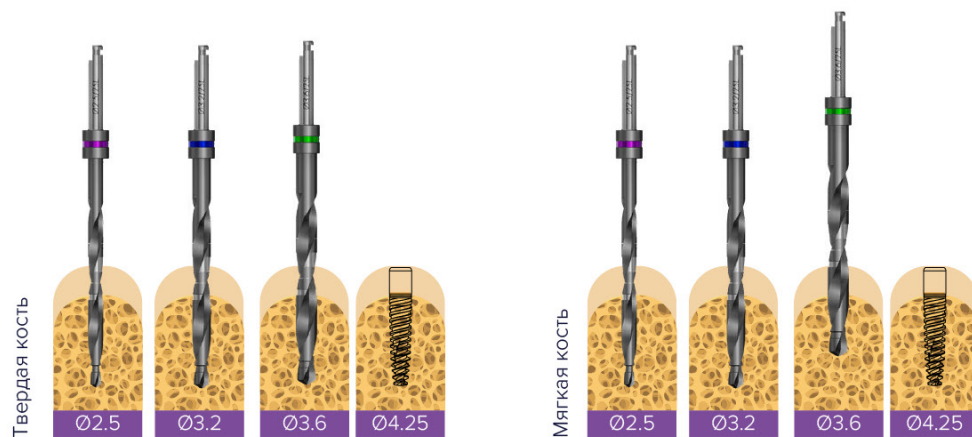

CloseFit WP

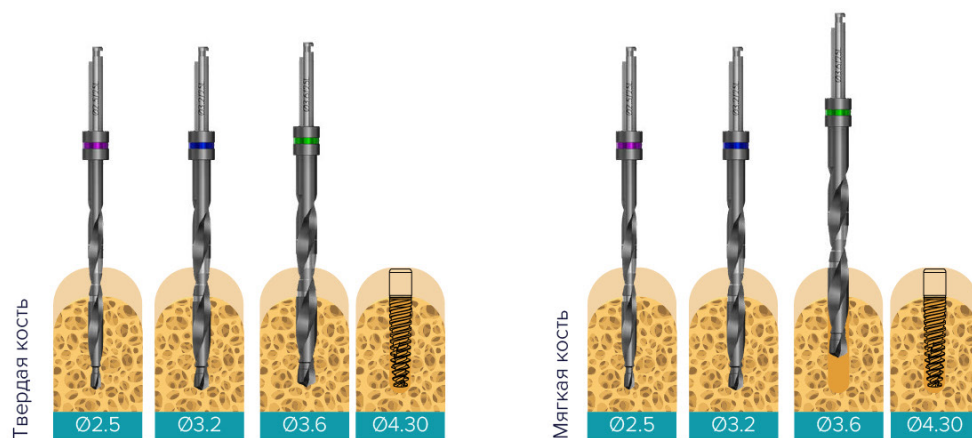

Длинные имплантаты



Индивидуальный подход
Профессиональное отношение

Каждый бизнес начинается с концепции.

У компании Adin Dental Implants она очень проста: мы создаем наилучшие из возможных современных решений для дентальной имплантации, наши продукты – бескомпромиссное качество по доступной цене.

Пользователи нашей системы помогают нашему бизнесу расти и процветать, вот почему мы придаем такое большое значение построению прочных и долгих личностных взаимоотношений, которые позволяют удовлетворять потребности не только врачей, но и их пациентов. Понимая, что успех каждого отдельного пользователя системы - это наш успех, мы сосредоточены на предоставлении высококачественных доступных решений и исключительных услуг, которые помогают карьерному и профессиональному росту.

📍 190005, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 141 Б
☎ +7 (800) 500 36 60

📍 125130, г.Москва, ул. Клары Цеткин, 31
☎ +7 (495) 780 60 80

office@adinrussia.ru
adinrussia.ru